

株式会社アラソフトウェア

eye-Box シリーズ smartR

品番・型番

215190-01914-000003

機器の概要

機器の機能

個人情報保護法に配慮したシルエット表示型の見守りカメラです。モーションベクター機能によって人の移動など動きを行動履歴として記録し、トイレから戻ってこない、同じ場所を何回も歩いている、いてはいけないところにいる等、普段と違う行動を検出してスマートフォンやタブレットに通知することができます。また、行動履歴をチェックすることで異常行動の兆候を知る手助けにもなります。

販売開始 2019年3月

販売価格 250,000円(税抜)

TAISコード 01914-000003



機器の写真

機器の仕様

- ・smartR 撮影範囲：水平 96° × 垂直 54°
赤外線 LED：有
赤外線照射距離：10m
被写体最低照度：カラー 0.1Lux
モノクロ 0.00Lux(赤外線 ON)
電源：PoE (IEEE802.3af)
または DC12V
消費電力：3W、動作可能周囲
環境：-20 ~ 50 度、湿度 90%
外形寸法：100 (径) × 49 (高) mm
重量：180g
- ・管理用 PC OS：Windows10
CPU：Intel Core i5 または i7
メモリ：8GB 以上
ストレージ：1TB 以上
ネットワーク：有線 LAN
- ・その他の必要機器 PoE 給電可能なネットワークハブ、通知機能を使用する場合はインターネット環境

機器の貸出

必須環境・推奨環境


施設向けのシステムでは管理用 PC が必要です。本システムは LAN ケーブルで接続する必要があり、設置場所に合わせて必要な長さをご用意ください。当社での設置、配線工事は行っておりませんので、施設でお付き合いのある電気工事会社などに手配をお願いします。

試用期間中のサポート

設置場所によっては行動履歴の解析に影響が出ることもあるため、動作が思わしくない場合は施設側と協議の上、可能な範囲で対応させていただきます。

貸出期間 1ヶ月間

貸出可能台数 5台

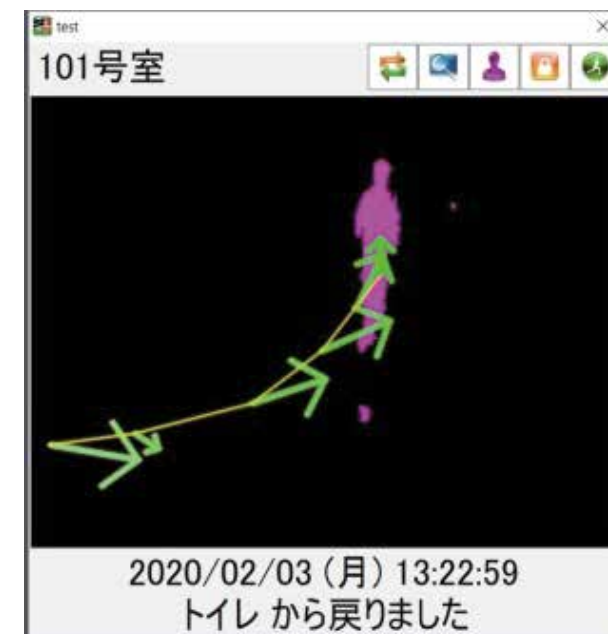

機器の使用場面

問い合わせ先

株式会社アラソフトウェア

所属部署：情報技術部
担当者名：岩久保、原
〒090-0836 北海道北見市東三輪 4 丁目
16-10

TEL 0157-33-1167
MAIL arasoft@arasoftware.com

株式会社アルコ・イーエックス

パシエントウォッチャープラス

品番・型番

PWS-R3L02

機器の概要

機器の機能

パシエントウォッチャープラスは、常に利用者様を見守り数秒間隔で現在の画像を画面に表示。この画面を適宜観察する事で、お部屋に行かなくても状況を確認できます。また、利用者様の動きを音とアイコンでお知らせも可能で、施設のナースコールと連携もできます。標準装備の USB メモリでの録画や、オプションでバイタルセンサーを接続する事でバイタルを収集し異常があればお知らせも可能です。

機器の仕様

電源：AC100 50/60Hz
消費電力：19W (最大)
外形寸法：直径 250mm ×高さ 75mm
質量：約 840g
設置位置：ベッド頭部側中央、高さ約 1.7m
対応ベッドサイズ：シングルベッド

販売開始 2019 年 10 月
販売価格 248,000 円 (税抜)
TAIS コード 01803-000003



機器の写真

機器の貸出


必須環境・推奨環境

- ・本事業における試用貸出に限り、受信機としてご利用いただける端末を 1 台貸出いたします。
- ・もともと施設様でお持ちのパソコン等を受信機としてご利用いただく事も可能です。
- ※受信機はインターネット接続が必要です。
- ・ソフトバンク株式会社のサービスエリア内にあり、本体を取り付けたい場所の通信状態が良好である事。

試用期間中のサポート

お困り際には電話にて対応いたします。
万が一機器が故障した場合は代替機をご用意いたします。

貸出期間 2 週間
貸出可能台数 2 台

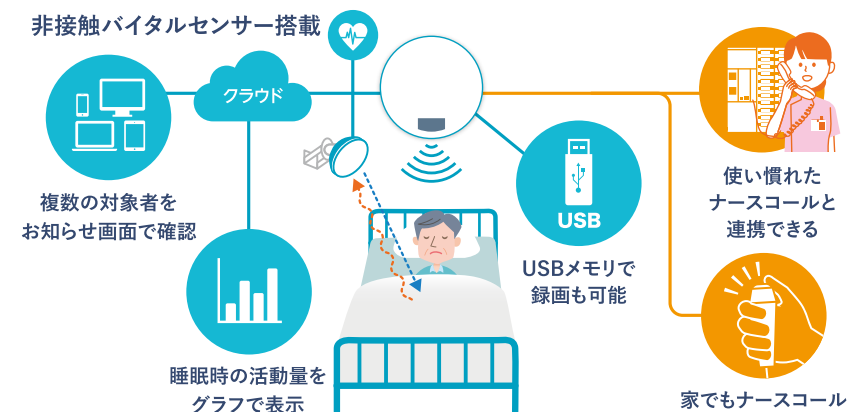

機器の使用場面

問い合わせ先

株式会社アルコ・イーエックス

所属部署：営業部
担当者名：瀧村
〒312-0036 茨城県ひたちなか市津田東 4-10-5

TEL 029-275-8072
MAIL alco-ds@alco-ex.jp

株式会社エイビス

エイビスみまもりシステム

品番・型番

AIVS-001-01

機器の概要

機器の機能

- ◇[ベッド上にいる][起き上がり][離床][異常な動き(痙攣等)]などの状態変化をモニタリング。
- ◇ご利用者ごとの危険レベルを設定し、必要な状態でアラーム通知。正確な判定で誤報が少ない。
- ◇アラームの通知機能は3種類から選択。
 - ・パソコンで管理して携帯端末へお知らせするネットワーク型
 - ・既設のナースコールでお知らせするナースコール型
 - ・簡易受信機でお知らせする通報器型

販売開始 2014年6月

販売価格 180,000円(税抜)



機器の写真

機器の仕様

【共通セット】

- ・情報ボックス、パネルセンサー（マットレスの下に設置）。

【ネットワーク型】

- ・パソコン みまもり支援システムをセットアップ。ブラウザでベッド一覧やアラーム通知の受信。
- ・無線LAN 携帯端末を持ったスタッフの動線は網羅したエリアが必要。
- ・スマホ アンドロイドに専用のアプリをインストールして使用。
- ・ネットワークカメラ ベッドサイドに設置すれば、アラーム通知時に状況を映像で確認できる。

【ナースコール型】

- ・ナースコール分配器 アイホン社、ケアコム社、それぞれのコネクタ形状に合わせて用意。

【通報器型】

- ・簡易型通知装置 無線でアラーム通知時に音でお知らせ。

※販売価格は共通セットのみ

機器の貸出

必須環境・推奨環境


必要な機器はお貸ししますので特に必要ありません。

貸出期間 7～30日間

貸出可能台数 2台

試用期間中のサポート

基本的に電話にて運用サポートします。必要に応じて、リモートソフトウェアを利用、訪問してレクチャーします。

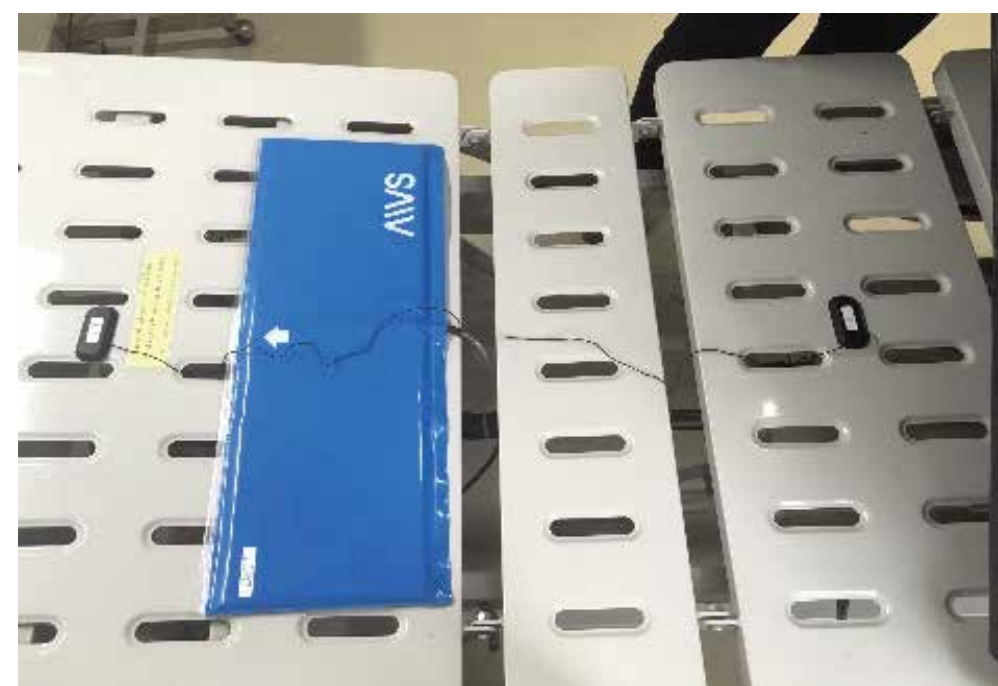

機器の使用場面

問い合わせ先

株式会社エイビス

所属部署：介護事業本部
 担当者名：久保雅紀
 〒870-0026 大分県大分市金池町
 3-3-11

TEL 097-536-0999
 MAIL m_kubo@aivs.co.jp

エイアイビューライフ株式会社

A.I.Viewlife

品番・型番

IR センサー
型番：VP105J-POE-IR

機器の概要

機器の機能

- ・ICF の生活機能モデルを基準とした要介護者の安全性と緊急対応を実現させた上で「自立支援・重度化防止」と「介護人材確保と生産性向上」への取り組みを支援します。
- ・感染症リスク対策支援システムとして、訪室すること無く被介護者の健康状態を遠隔にて把握する情報を表示することができます。(訪室回数の低減効果より)
- ・遠隔保守サポート機能(インターネット必要、保守契約必要)

販売開始 2018 年 10 月

販売価格 330,000 円 (税抜)

感染症対策支援システム

A.I.Viewlife

業界初!居室全体を見守る、
広角IRセンサーを搭載

機器の写真

機器の仕様

<システム>

- 業界初の広角赤外線レーザー採用し、3次元画像を用いた高度な動作検知アルゴリズムを搭載
 - ・対象エリア：ベッドエリア含む居室全体(ベッド、居室、トイレ等)
 - ・危険予兆動作：起き上がり、端座位、立位、離床、入室、退出
 - ・危険状態：転倒、ベッド転落、うずくまり、横たわり、トイレ異常、生体異常
 - プライバシー保護された画像での閲覧・検知・録画データの通知・記録保存(常時録画機能あり)
 - バイタル(体動・呼吸)情報での閲覧・検知データの通知・記録保存(グラフ表示)
 - 感染症対策(訪室することなく被介護者の日常生活動作や危険状態を遠隔にて把握可能)
 - 居室タイプ：多床室、ユニット(個室)、床マットや畳布団への設置可能
 - 一切の拘束が無い非接触方式
 - 検知データ連携：[ナースコール：アイホン/ケアコム/ナカヨ]、[介護記録ソフト：ほのぼの、ワイズマン、福祉の森、ケアカルテ]
- <必要 NW 環境>
- IR センサー：POE 給電方式
 - 生体センサー：IR センサー間は USB ケーブル (Type-A to microB)
 - LAN：1000BASE CAT5e 以上
 - WiFi：2.4Ghz 帯

機器の貸出

必須環境・推奨環境

- ・ノート PC 型サーバー設置場所の確保(ステーション等)
- ・簡易的な WiFi 環境構築 (WiFi ルーターやコンバーター設置)
- ・推奨接続方法：ノート PC 型サーバーと IR センサー間を有線 LAN 接続

試用期間中のサポート

弊社が取付・設置実施後の操作説明会を実施。土日祝日含め電話やメール等のフォローの他、遠隔操作サポート(インターネットを介し同じ画面を見て設定調整や検知設定など) ※緊急時は担当営業へ時間外連絡可能

貸出期間 10 日間前後

貸出可能台数 1 台



機器の使用場面

問い合わせ先

エイアイビューライフ株式会社

所属部署：営業・サポート
担当者名：横沢、山出
〒102-0092 東京都千代田区隼町 2-13
US 半蔵門ビル 201

TEL 03-6261-6327
FAX 03-6261-6328
MAIL support@aiview.life

加藤電機株式会社

見守りシステム SAN フラワー X ヘルシーライフ

品番・型番

ARMK-200

機器の概要

機器の機能

事業所から発信機を携帯したご利用者様が離設・帰設された際、GEO フェンス SAN アンテナを通じて介護スタッフなどへメールにて通知します。発信機は長期間連続稼働（約1.5ヶ月）するため、充電の手間や充電切れが少なく安心です。また、搜索機器で最小誤差50cmまで誘導され、発見することができます。専用シューズは発信機の携帯忘れ防止に効果的です。

販売開始 2017年6月
販売価格 191,700円(税抜)
TAISコード 01572-000007



機器の写真

機器の仕様

GEO フェンス SAN アンテナ:
38 × 160 × 100mm (突起部を除く)、257g
内蔵バッテリー:
1100mAh (リチウムイオン電池)
小型 SAN タグ (発信機):
約 29 × 34 × 10.5mm (突起部を除く)、約 9g
内蔵バッテリー: 120mAh
充電方法: マイクロ USB 充電
SAN レーダー (搜索機器):
約 68 × 114 × 14mm、約 70g
内蔵バッテリー: 300mAh
充電方法: マイクロ USB 充電
ヘルシーライフ 500 (専用シューズ)
SS (21.0 ~ 21.5cm)
S (22.0 ~ 22.5cm)
M (23.0 ~ 23.5cm)
L (24.0 ~ 24.5cm)
LL (25.0 ~ 25.5cm)
3L (26.0 ~ 26.5cm)
4L (27.0 ~ 27.5cm)

機器の貸出

必須環境・推奨環境

GEO フェンス SAN アンテナを設置するスペースと家庭用の AC100V コンセントから電源が取得できれば大丈夫です。面倒な電源工事は不要です。GEO フェンス SAN アンテナは、コンパクトサイズで場所をとりませんので、設置するスペースも簡単に確保いただけます。



機器の設置イメージ

試用期間中のサポート

ご用意いただければ担当スタッフが現地に
出向き、機器の設置・使用方法を詳しく説明
いたします。また、取扱説明書や動画をご用意
しております。ご不明な点など、お気軽に
ご相談ください。

貸出期間 1週間

貸出可能台数 3台



機器の使用場面

問い合わせ先

加藤電機株式会社

所属部署: 営業部
担当者名: 吉澤、榎本
〒475-8574 愛知県半田市花園町 6-28-10

TEL 0569-21-6182
MAIL sa2_nagoya@kato-denki.com

キング通信工業株式会社

シルエット見守りセンサ

品番・型番

WOS-114N

機器の概要

機器の機能

起き上がり / はみ出し / 離床を区別して検知し、介護者にお知らせします。ご利用者の様子をシルエット画像で確認することができ、プライバシーを保護しながら、事故発生を予防します。センサ1台から運用可能で、複数の居室間の移設も可能です。異常検知のシルエット画像が履歴に保存されるため、施設内の情報共有やご家族への説明に役立ちます。履歴記録オプションで、常時録画ができ、ご利用様の動きをデータ分析できます。

販売開始 2015 年 4 月

販売価格 300,000 円 (税抜)

TAIS コード 01558-000003

機器の仕様

電源電圧: AC100V ± 10V 50/60Hz

消費電力: AC100V 時 15W

周囲温度: 0℃ ~ 40℃

通信: 有線 LAN (1 ポート、通信速度:
10Mbps/100Mbps)

または無線 LAN (2.4GHz)

取付方式: 壁面設置または自立型ポール設置

サイズ・重量: 116 (H) × 217 (W)

× 126 (D) mm; 約 800g

材質: PC/ABC 樹脂



機器の写真

機器の貸出

必須環境・推奨環境

無線 Wi-Fi、表示端末 (パソコン、タブレット、スマホなど)

※機器運用に必要な周辺機器 (無線アクセスポイント、表示端末) の貸出も可能ですので、施設側で特に用意することはございません。

試用期間中のサポート

使用方法の説明

設置・設定方法の問い合わせ対応

貸出期間 2 週間程度

貸出可能台数 1 セット

(機器本体と周辺機器を含む)



機器の使用場面

問い合わせ先

キング通信工業株式会社

所属部署: 営業統括本部

担当者名: 高橋絵理子

〒158-0092 東京都世田谷区野毛 2-6-6

TEL 03-3705-8540

MAIL e-takahashi@king-tsushin.co.jp

コアフューテック株式会社

e 伝之介くん

品番・型番

EDS-01SSCMR000

機器の概要

機器の機能

高性能赤外線カメラを通して取り込んだ画像を、本体に内蔵する高度な画像処理ソフトが利用者の頭部を自動で認識・追尾・検知・解析・可視化する事で、利用者のベッドからの「起床」・「立ち上がり」・「離床」を検知・通知する。それ以外の機能は持たせず、余分な付帯工事・付帯機器／ソフト等は不要である。必要な時に必要な場所に簡単に移動・設置・稼働が可能なスタンドアロンタイプの非接触型見守りセンサー。



機器の写真

機器の仕様

1. 電源：AC100V
2. 消費電力：7.75w
3. 取り付け・配線工事：不要
4. e 伝之介くん本体：サイズ
L：200mm × W：120mm × H：50mm
重量：320g
5. 感知方法：LED 照射による赤外線カメラでの画像を画像処理ソフトで解析
6. 通知方法：①ナースコール経由、
②独自ワイヤレスチャイム（見通しで 120m）、
③独自無線（見通しで 1,000m）
7. 取り付け方法：①スタンドタイプ
②壁付けタイプ
③超低床ベッド用ヘッドボードタイプ
8. 標準カラー：①アイボリーホワイト
②ダークグレー（つや消し）

販売開始 2019 年 4 月

販売価格 128,000 円（税抜）

TAIS コード 01903-000001

機器の貸出

必須環境・推奨環境

- ① PCを内蔵する電子機器であり、丁寧なお取り扱いをお願いします。
- ②カメラに対して強い西日等の逆光の場合は、カーテン等のご使用をお願いします。
- ③認識精度向上の為、枕元周辺には物を置かないでください。
- ④布団での使用は、想定しておりません。

試用期間中のサポート

通常営業日 9：30 - 17：00
電話・メールにて対応致します。

貸出期間 2週間

貸出可能台数 2台



機器の使用場面

問い合わせ先

コアフューテック株式会社

担当者名：橋本眞
〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東
2-888KTS ビル 2 階

TEL 070-4803-1522

MAIL m_hashimoto@corefutech.co.jp

シーホネンス株式会社

ベッド内蔵型見守りセンサー「iサポート」搭載 Xシリーズ

機器の概要

機器の機能

「iサポート」は、非接触・無拘束でご利用者さまの自立行動を尊重しつつ、シンプルかつ本質的に必要なサポートができるベッド内蔵型見守りセンサーです。

お使いのナースコールを通じて、ご利用者さまのベッド上での起き上がり・離床・徘徊などの状態をリアルタイムにスタッフに知らせることができるので、転倒や転落などのリスク低減や、適切なタイミングでスタッフが訪室するなどの介護業務効率化にもお役立ていただけます。

販売開始 2018年11月
販売価格 665,000～
1,030,000円（税抜）



機器の写真



機器の仕様

ベッドに内蔵されたセンサーにより、ご利用者さまの起き上がり・離床・徘徊の状態を検知し、分岐ボックスを介して現在お使いのナースコールにお知らせします。

【アラート設定】

操作コントローラーの4つのボタン〔起き上がり（感度調節可能）・離床・見守り〕から1つを選んで押すだけで設定完了。体重の入力や、ご利用者さまがベッドに戻った際の再設定も不要です。

【誤操作防止ロック機能】

操作コントローラー裏面のロック機能を活用することで、意図しない設定変更や電源の切替を防止します。

【足元灯（オプション）】

ご利用者さまが離床しようとする動作を検知して点灯します。足元を照らすので夜間のトイレの際などに躓きなどによる転倒のリスクを低減します。

機器の貸出

必須環境・推奨環境

お使いのナースコール設備によって分岐ボックスのコネクタ形状が異なりますので、適合確認が必要です。（分岐ボックスがない場合もございます。）

貸出期間 2週間～

貸出可能台数 1台

試用期間中のサポート

使い方や設定などでお困りごとがございましたら、最寄りの弊社支店・営業所の担当スタッフがサポートいたします。また貸出期間などについてはご要望をお聞きますのでお申しつけください。



機器の使用場面

問い合わせ先

シーホネンス株式会社

所属部署：事業戦略室
担当者名：佐藤大輔
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北3-10-17

TEL 06-6973-3471
MAIL strategy@seahonence.co.jp

凸版印刷株式会社

SensingWave® 介護・睡眠見守りシステム

品番・型番

1803CI


機器の概要

機器の機能

ベッドのマットレスの下に敷いて使用するシート型非接触見守りセンサーです。寝ている利用者のバイタル情報（心拍・呼吸）や睡眠の質（深い／浅い、睡眠時間・熟睡度）を数値化します。従来のセンサー製品と異なり、利用者がしっかり眠れているかどうかを確認できるため、夜間の巡視効率化やケアの質向上、プラン改善にも活用可能です。また、データはクラウド上のデータベースに蓄積されるため、遠隔での情報共有が可能です。

販売開始 2018 年 4 月

販売価格 170,000 円（税抜）

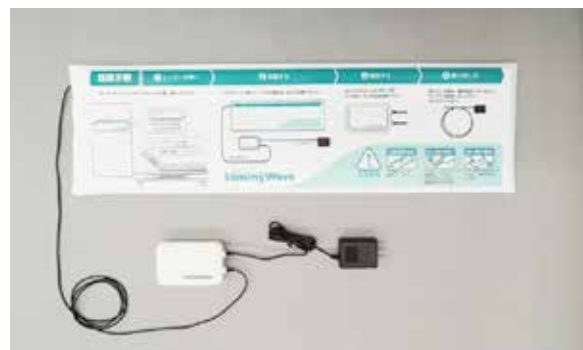

機器の写真

機器の仕様

センサーマット部 225mm × 750mm、重量約 750g の製品です。シート部分をマットレス下に敷き（利用者の胸の下あたり）、電源を入れるだけで設置完了です。厚さ 20cm のマットレスまで対応可能です（一部エアマットも可）。基本的には Wi-Fi へ接続しますが、環境が無い施設はモバイルルーターの提供も行っています（オプション）。計測したデータはクラウドサーバーに蓄積され、パソコンやスマートフォンのウェブブラウザで閲覧します。専用端末や専用ソフトのダウンロードは必要なく、インターネットに繋がっている端末であればお使いいただけます。データの閲覧は、購入時に発行する URL と、ID・パスワードで可能です。「一覧画面」「詳細画面」「1 日のレポート」が閲覧できます。管理画面では、「アラート通知」の設定ができます。「アラート通知」は、施設の担当者が、利用者の状態によって通知するイベント（「覚醒」「離床」等）と通知する時間帯、タイミングを設定することができます。機器の使用方法や、管理画面の操作方法についてのマニュアルを用意しております。

機器の貸出

必須環境・推奨環境

本体通信にはモバイルルータ付機器の貸出を行います。

データ確認用の PC・タブレット・スマートフォンのいずれか（インターネットにつながるもの）をご準備ください。

試用期間中のサポート

試用期間開始時の職員への勉強会や、期間中の不明点への回答、使用期間後のフィードバックまで一貫して対応いたします。

貸出期間 1～2 週間 *要相談

貸出可能台数 1 台～ *要相談



機器の使用場面

問い合わせ先

凸版印刷株式会社

所属部署：環境デザイン事業部 まちづくり本部
担当者名：立山、伊藤
〒110-8560 東京都台東区台東 1-5-1

TEL 03-3835-6462
MAIL sensingwave@toppan.co.jp

トーテックアメニティ株式会社

高齢者見守りシステム『見守りライフ』

品番・型番

SMC-C

機器の概要

機器の機能

『見守りライフ』は、高齢者施設における入居者の転倒・転落リスクという課題と、深刻化している介護業界の人材不足という問題解決をサポートします。より早く入居者の危険を検知できることに加えて、ICTを活用することで、限られた人員でも効率的な介護業務ができるように開発された見守りシステムです。離床を検知するスピードや精度において、ご利用中の施設から高い評価を頂いております。工事不要で導入できます。

販売開始 2016年9月

販売価格 178,000円～（税抜）

機器の仕様

【機器仕様】

- ・センサ：245(L) × 160(W) × 42(H)mm、1100～1400g
- ・メインボックス：170(L) × 85.5(W) × 35.5(H)mm、200g
- ・コントローラ：139(L) × 77(W) × 30(H)mm、200g

【離床センサ】

- ・検知した情報をナースコールで通知します。現在ご利用中のナースコールとの連携が可能です。
- ・離床予知・検知の通知のタイミングは、動き出し・起き上がり・端座位・離床で選択できます。選択はいつでも変更できます。
- ・ベッドに寝るだけで体重の測定が可能です。
- ・センサを避けられず、確実に離床を検知できます。



機器の写真

【見守りシステム】

- ・複数の入居者の状態を、パソコンやタブレット PC などを通してリアルタイムで見守りできます。
- ・バイタルの異常を検知して画面上での通知が可能です。（オプション）
- ・温湿度を計測し、画面上で表示およびアラート表示することが可能です。（オプション）

【データ活用】

- ・入居者の生活リズムを自動で可視化し、ケアプランへ活用できます。
- ・睡眠時間や体重の変化を記録します。
- ・介護日誌への活用も可能です。

機器の貸出

必須環境・推奨環境

- ・ナースコール接続する場合、既存分配器をご用意ください。（分配器が無い場合、ご相談ください）
- ・無線環境の有無に関わらず試用可能です。
- ・ベッドやキャスタのサイズに関わらずご利用いただけます。

試用期間中のサポート

ご不明点やご要望がある際は電話にてご対応いたします。

受付時間 9:00～17:30（土日祝日は除く）



機器の使用場面

貸出期間 1ヶ月

貸出可能台数 5台

問い合わせ先

トーテックアメニティ株式会社

所属部署：ネットワークソリューション事業部
スマートコミュニティ事業推進室

【首都圏・静岡県東部（富士宮市以东）】
〒163-0417 東京都新宿区西新宿 2-1-1
新宿三井ビルディング 17F

【中部圏・静岡県西部（静岡市以西）・滋賀県】
〒451-0045 愛知県名古屋市中区名駅 2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー 7F

【関西圏】
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島 2-1-31
京阪堂島ビル 9F

TEL 【首都圏・静岡県東部（富士宮市以东）】
03-5657-3216

【中部圏・静岡県西部（静岡市以西）・滋賀県】
052-533-6919

【関西圏】
06-6147-2100

MAIL mlife@totec.co.jp